

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE



折りたたみ式 モジュラー車いす

Motus

モータス

One for all . . . 活動レベルに合わせて車いすの仕様を選択できる



One for all Motus

車いすの見た目、機能性、移動性、重量など、車いすを使う方が考慮するポイントの中で「使って安全・安心」な製品であることは福祉用具にとって非常に大切です。中でも本体のフレームの安全性はその基本といえます。椅子と同様に身体をあずけるフレームがしっかりしていないと、使用中に思わぬ事故を引き起こします。

オットーボック社の車いすは、フレームの要となっているクロスブレース（座面の下部分のX型のパイプ部分）の剛性の高さなどをはじめ、安全性に対して優れた技術を持っています。また、ドイツ本社での耐久試験など製品の安全面に関しても多くの試験をパスした製品ですので、安心して、安全に長期間ご使用いただけます。

■ オプション

アームレスト付サイドパネル（高さ調節付）

このサイドパネルは、後方へはね上げ、取り外すことができるため、ベッドやトイレ等への移乗やトランスボードを使用しての移乗にも便利です。また、パネルの上部にあるアームレストは、身体や状況に応じ、ワンタッチで高さの調整が行えます。



アームレスト付きサイドパネル

エレベーターフットレスト

骨折などにより車いすを使用する際に、足を上げた状態に保つ必要がある方のために、様々な角度で膝下部分を保持することができるフットレストです。ノブを操作することで、楽に休息できる角度など、希望の角度にワンタッチでフットレストを設定することができます。



エレベーターフットレスト

介助用ドラムブレーキ

介助する方が使用するためのブレーキです。ドラムブレーキが付いていても、クイックリリースにより、ワンタッチで後輪の取外しが可能なため、車への積み込み時などに便利です。

■ 仕様


素材	アルミニウム	
重量	約 13 kg～	
耐荷重	125 kg (座幅 35.5 cm ～ 48 cm)	
	140 kg (座幅 50.5 cm ～ 55.5 cm)	
背高	30 cm～ 50 cm	
座幅	35.5 cm、38 cm、40.5 cm、43 cm、45.5 cm、48 cm、50.5 cm、53 cm、55.5 cm	
座奥行	36 cm～ 54 cm	座幅等のサイズにより範囲が決まります。
前座高	42 cm～ 52 cm	キャスト、ホイール等のサイズ、設定により範囲が決まります。
後座高	36 cm～ 52 cm	
全幅	約 52 cm～ 72 cm	ドラムブレーキなしの場合 ドラムブレーキ付の場合 (いずれの場合も、座幅により変わります。)
	約 55.5 cm～ 75.5 cm	
全長	約 80.5 cm～ 108.5 cm	22 インチホイールの場合 24 インチホイールの場合 (いずれの場合も、設定により変わります。)
	約 83 cm～ 110 cm	

■ バックシートカラー



グリーン / ブラック ブロンズ / ブラック
*仕様によってはブラックのノーマルシートになります。

■ フレームカラー

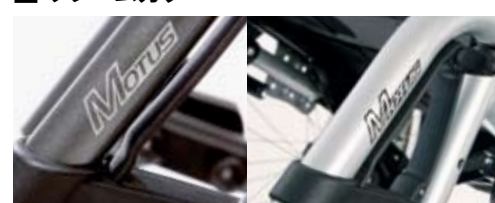

アンソラサイトメタリック* シルバーメタリック
*無煙炭色（ブラックに近いメタリック）

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp

〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F

TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

お問合せ先