

# Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



## ヌルミネオ Natural Walking

誰にとっても、歩行はとても大切な生活の一部です。  
特に障害を持ったお子様にとって歩行を経験することは大変重要となります。

ヌルミネオは前のフレームがオープンになったユニークな形で、立位時及び歩行時の直立姿勢を促進するように設計されています。  
また、駆動の軽さとスムーズなキャスターの動きは、最小限の力で歩行器を動かすことを可能とし、残存機能を有効に活用、またその機能を向上させることができます。

さらに、優れた安定感を持ち、高い安全性を確保しています。  
お子様の成長に合わせて、各部の調整が可能です。  
また豊富なオプションとの組み合わせで、様々なケースに使用が可能です。  
本体を2つに折りたたむことができるため、持ち運びにも便利です。



オットーボック・ジャパン株式会社



# ヌルミネオ

# Nurmi Neo

## ヌルミネオ 詳細

- フレームはお子様の体型に合わせて3種類ご用意しております。
- 手で持つグリップ部分は高さ及び前後への調節が可能です。
- 後方への動きを止めるため、逆転防止装置が付いております。  
(ロックを解除すると後方への移動も可能になります。)

## 【オプション】

1. 摩擦ブレーキをつけることで、車輪の転がり抵抗が調節可能になりますので、静止から自由な速度までコントロールできます。
2. シートは椅子型(折りたたみ可能)のものと、スリングシートがあります。
3. 必要に応じて、バスケットや転倒防止装置も取り付け可能です。
4. ユニバーサルグリップバー、縦型ハンドルなど、手の長さや身体状況に応じてグリップの選択が可能です。
5. 前輪にもキャストロックを取り付けることが可能です。

## 仕様データ

	サイズ1	サイズ2	サイズ3
ハンドルの高さ 標準	45~57cm	58~72cm	64~78cm
ハンドル間の幅 標準	41cm	46cm	51cm
ハンドルの高さ ユニバーサルグリップ	38~57cm	51~72cm	57~78cm
ハンドル間の幅 ユニバーサルグリップ	27~41cm	32~46cm	37~51cm
ハンドルの高さ ミニ	31~48cm		
ハンドル間の幅 ミニ	20~41cm		
グリップの直径	3cm	3cm	3cm
前腕サポートの高さ(床から)	53~64cm	66~79cm	71~84cm
前腕サポート間の幅(中央)	25~41cm	30~46cm	35~51cm
前腕サポート 幅×長さ(内部)	7cm×16cm	7cm×21cm	7cm×21cm
全幅	63cm	68cm	72cm
全長(転倒防止付き+10cm)	65cm	76cm	83cm
折りたたみサイズ(長さ×幅×高さ)	65×63×24	76×68×24	85×72×24
前輪径	15cm	15cm	15cm
後輪径	15cm	20cm	20cm
耐荷重	25kg	40kg	55kg
重量	5.5kg	6.0kg	6.5kg
シートの高さ	30cm	45cm	48cm
旋回径	86cm	99cm	106cm



骨盤サポートパッド



後輪ブレーキ



縦型ハンドル(前腕サポート付属)



ユニバーサルグリップバー



バスケット



転倒防止装置




逆転防止装置



摩擦ブレーキ



スリングシート

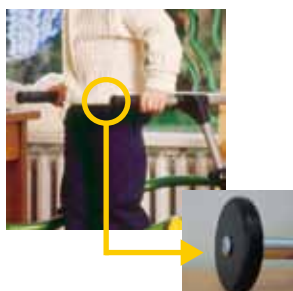

ハンドプレート