

## ゲニユ カレッツァ パテラ スタビライザー 【8360】

『ゲニユ カレッツァ パテラ スタビライザー』は、膝蓋骨周辺をダイナミックにサポートするとともに、装着時のストレスを最小限にするように設計されたコンパクトボディの膝蓋骨制限用サポーターです。

### 特徴

#### ■ Cシェイプ パッド

⇒側方にはストラップと連動したテーパ付き半月形状の発泡素材パッドを内蔵しています。

膝蓋骨側方にフィットする解剖学的な形状で、サポート時の過度の当たりや違和感を少なくするよう配慮しています。

また、側方パッドの両端と本体とを同時に引っ張ることで、ダイナミックに膝蓋骨を押さえることができます。



#### ■ コンパクトボディ

⇒本体はショートタイプのコンパクトボディで、膝蓋骨周辺を的確にサポートするよう設計されています。

膝関節の動きを妨げないよう、膝窩部はさらにショート丈になっています。また、本体素材にクッション性があるため、屈曲時のかさばりやストラップの食い込みも緩衝されます。




## 特徴

### ■ 左右兼用構造

⇒左右兼用ですので、左右の膝蓋骨の外側あるいは内側にパッドの位置を合わせることで、必要に応じた装着が可能です。

### ■ 高性能素材“Space Tex®”

⇒本体には伸縮性のある立体編み素材を採用。高い伸縮性によりフィット性が高く、優れた通気性と吸汗発散構造により、快適な装着性が得られます。素材にはコシがありクッション性もあります。

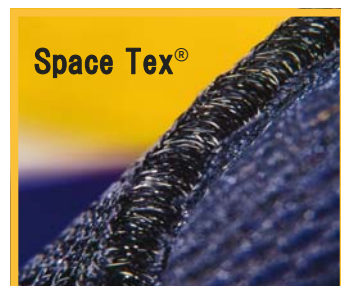

## 製品規格

各製品は下記のサイズ表からお選び下さい。


製品 No.	種類	規格	
		膝蓋骨中心周径 (cm)	膝蓋骨中心より下 15cm下腿周径 (cm)
8360=XS	XS	30.0~34.0	32.0~35.0
8360=S	S	34.0~37.0	35.0~38.0
8360=M	M	37.0~41.0	38.0~41.0
8360=L	L	41.0~44.0	41.0~44.0
8360=XL	XL	44.0~48.0	44.0~48.0

※左右兼用

※下腿周径の規格は参考値です。

#### <<サイズの測り方>>

イラストのように膝蓋骨中心の周径を測ります。

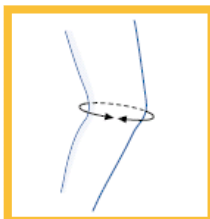

### Features

- 動きを妨げないコンパクトボディ
- ストラップ調整機構付きパッド
- 両膝蓋骨の内外側に装着適応
- 快適な装着感