

アクロ コンフォート 【5055】

『アクロ コンフォート』は、上腕から肩関節にかけて肩関節周囲を保護するとともに、肩の屈曲・伸展・外転の三方向の動きに対して、肩関節の安定性を高めるように設計された肩関節サポーターです。

本体素材には温度調整機能と通気性があり、快適な装着感が得られます。



特徴

■ 可動調整ストラップ

上腕部に縫い付けられた非伸縮ストラップが、肩関節の前方・外側・後方の三方向に走行し、引張り調整を行なえる構造となっています。

これらのストラップにより適度な圧迫を与えることで、肩関節の正常な動きをしっかりとサポートします。



■ 温度調整機能素材の採用

本体素材にはNASAの宇宙服やアウトドア用アウターに使われている温度調整テクノロジーを採用しています。マイクロカプセル内の物質が液体化(蓄熱)⇔固体化(放熱)することで、体温に近い温度環境を保ち、快適な装着感が得られます。

■ 左右兼用構造

左右兼用で、胸部ベルトの前後どちら側でも長さ調整および着脱ができる構造となっています。装着者自身でも、前面のベルトを調整するだけで簡単に操作できます。



ショルダー サポート 【7126】

『ショルダー サポート』は上腕部から肩関節周囲を包み込むようにサポートする肩関節サポーターです。肩関節の保護をしながら可動域を必要以上に妨げないように本体は伸縮性のある生地で構成されています。



特徴

■ 肩を包み込むサポート力

本体生地には3mm厚のネオプレン素材を使用していますので、伸縮性と保温性に優れています。肩関節周囲を包み込むようにフィットする解剖学的なデザインで、サポートと動きのバランスを図っています。

■ 左右兼用構造


左右兼用で、胸部ベルトの前後どちら側でも長さ調整および着脱ができる構造となっています。装着者自身でも、前面のベルトを調整するだけで簡単に操作できます。

製品規格

各製品は下記のサイズ表からそれぞれお選び下さい。
※左右兼用

製品 No.	種類	規格
アクロ コンフォート		上肢周径(cm)
5055=XS	XS	24.0~28.0
5055=S	S	28.0~32.0
5055=M	M	32.0~35.0
5055=L	L	35.0~38.0
5055=XL	XL	38.0~42.0

製品 No.	種類	規格
ショルダー サポート		上肢周径(cm)
7126=XS	XS	24.0~28.0
7126=S	S	28.0~32.0
7126=M	M	32.0~35.0
7126=L	L	35.0~38.0
7126=XL	XL	38.0~42.0

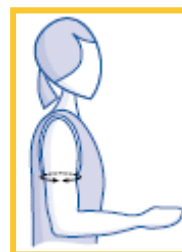

《サイズの測り方》

イラストのように上腕の最大周径を測ります。