



ロビー / レッキー バスチェア  
Robby / Leckey Bath Chair

オットーボック バスチェア シリーズ  
Ottobock Bath Chair Series

オットーボック バスチェア シリーズはお子様のニーズに合わせて2機種から選択していただけます。  
持ち運びが便利で軽量の「ロビー」  
オプションが豊富でカラー選択も可能な「レッキー バスチェア」  
それぞれ、ニーズに合わせてシートの色を変えることができます。

\*身長 165cm の方まで対応可能です。

レッキー バスチェア サイズ表


A ~ D の採寸場所は右の写真を参考にしてください。  
シャフトローリーはオプションパーツです。



	全長	A	B	C	D	座幅 / 全幅	重量	耐荷重
サイズ 1	98cm	15cm	35cm	23cm	26cm	43cm	7.0kg	72kg
サイズ 2	110cm	15cm	40cm	28cm	26cm	43cm	7.5kg	72kg
サイズ 3	130cm	22cm	46cm	34cm	34cm	43cm	8.0kg	72kg
サイズ 4	147cm	22cm	55cm	40cm	34cm	43cm	8.5kg	72kg
シャフトローリー	90 ~ 115cm	ローリー高さ :36cm				60cm	6.0kg	80kg

ロビー サイズ表

A ~ D の採寸場所は右の写真を参考にしてください。  
ロビーは成長対応型バスチェアのため、右図の B と C の長さ調整が可能です。サイズ表の範囲はそれぞれの最小値と最大値です。

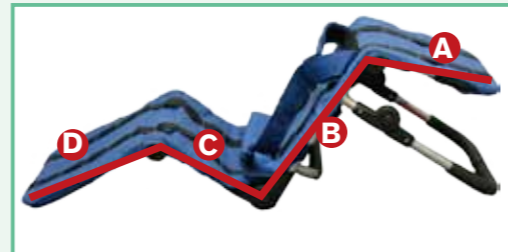

	全長	A	B	C	D	座幅	重量	耐荷重
サイズ 1	115 ~ 129cm	26cm	36 ~ 46cm	20 ~ 24cm	33cm	38cm	3.8kg	30kg
サイズ 2	147 ~ 173cm	35cm	44 ~ 59cm	29 ~ 40cm	39cm	38cm	4.3kg	60kg



いろいろな形で使用できたら・・・  
 少し体重が重い子供にも使えたら・・・  
 座りながらリクライニングができたら・・・



とにかくコンパクトなバスチェアがほしい・・・  
 洗髪が楽にできたら・・・  
 バスタブの中で使用できたら・・・



耐荷重 72kg に対応範囲が広いレッキーをお勧めします。

**特徴：**

- ・シート部と脚部の計 4 箇所角度調整ができ、座面角度やシートの高さなど、細かな調整が可能です。
- ・耐荷重は 72kg まで、折りたたみも可能です。
- ・簡易シートや外出時の携帯シートとしてもお使いいただけます。
- ・4 種類の基本サイズから選択していただくことで、体格に合わせた最適な製品をお使いいただけます。
- ・カバーは取り外して洗濯できます。

**材質：**

フレーム部：ステンレススチール、樹脂パーツ  
 シート部：ポリエステル

**仕様：**

・標準仕様：本体、胸ベルト（体幹パッド付）、骨盤ベルト（上の写真が標準仕様になります）

**カラーバリエーション：**

シートカバーはオレンジ、イエロー、ブルーの 3 色をそろえています。



オレンジ



イエロー



ブルー

**オプションパーツ**



**ヘッドサポート：**  
 お子様の頭部を安定させます。簡単に取り付けられるマジックテープ式です。



**アングルサポート：**  
 お子様の足を安定させます。簡単に取り付けられるマジックテープ式です。



**シャフトローラー：**  
 キャスター付の専用アンダーフレームです。入浴時だけでなく、屋内での移動にも便利です。



軽量でコンパクトに折りたたみ可能なロビーをお勧めします。

**特徴：**

- ・フレーム横の各ジョイント部分にある青色のボタンを押すことで、お子様のニーズに合わせてシートの形を変形することができます。
- ・座面およびバックレストは張り調整が可能です。（入浴時、または簡易シートとして使用中の）お子様の姿勢をサポートします。
- ・2 種類のサイズがあり、どちらも座奥行き、バックサポート部分の長さが調整可能な成長対応型になります。
- ・カバーは取り外して洗濯できます。
- ・頭部のサポートを倒すことで、洗髪なども容易になります。
- ・床面から近い距離で座れるため、バスタブ内でも使用することができ、また安定性、安全性に優れています。
- ・軽量、コンパクトなデザインのため、温泉やプールサイドなど、外出時に使用する際の持ち運びも容易です。

**材質：**

フレーム部：アルミニウム、樹脂パーツ  
 シート部：ポリエステル、ナイロン

**仕様：**

・標準仕様：本体、骨盤ベルト、レッグサポート（上の写真が標準仕様です）

**カラーバリエーション：**

シートカバーはブルー 1 色です。

軽量、コンパクトなので  
 片手でも楽に持ち運びができます。

**オプションパーツ**



**ヘッドサポート：**  
 お子様の頭部を安定させます。幅調整が簡単にでき、体幹パッドとしても使用できます。

