

膝関節軟性装具

ゲニユ ディレクサ ステーブル (8368)


可動域調整ができる2軸膝継手がついた、支持性の高い膝サポーター

特徴

- ・ 膝関節の可動域を調整可能
- ・ 非伸縮性ベルトで支持性を強化

角度調整機能付
軟性膝サポーター

Quality for life

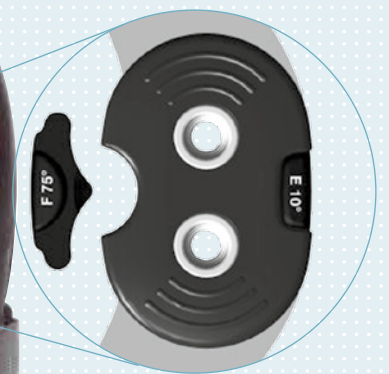

Click 2 Go システム

特徴およびサイズ

特徴

- ▶ **可動域調整機能**
 - リハビリ訓練や膝の回復に合わせて固定、屈曲・伸展の可動域制限、完全フリーなど、症状に合わせた調整ができます。
 - 調整は継手部分に付属の角度調整チップをはめ込み行うので、工具なしで簡単に調整することが可能です。
- ▶ **内外側のアルミ製支柱により側方安定性が向上**
- ▶ **非伸縮性のベルトにより支持性強化。後面の細いベルトは交叉させて使用も可能**



伸展/屈曲制限角度

伸展制限: 0° / 10° / 20° / 30° / 45°
 屈曲制限: 0° / 10° / 20° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°



▶ 可動域調整を行う "Click 2 Go システム"

サイズ


下記のサイズ表からお選びください。

発注品番	サイズ	適用範囲	
		大腿周径(cm)	下腿周径(cm)
8368=XXS-7	XXS	36-40	29-32
8368=XS-7	XS	40-44	32-35
8368=S-7	S	44-48	35-38
8368=M-7	M	48-52	38-41
8368=L-7	L	52-56	41-44
8368=XL-7	XL	56-61	44-48
8368=XXL-7	XXL	61-67	48-51

- 左右兼用 - 本体全長は約38cm

《サイズの測り方》

イラストのように膝蓋骨から上下15cmの大腿部、下腿部の周径を測ります。

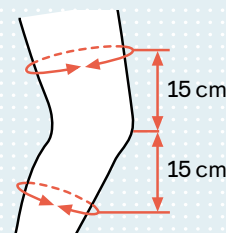

オットーボック膝装具のバリエーション

ゲニユ カレッツァ パテラ スタビライザー	ゲニユ ディレクサ	ゲニユ ディレクサ ステーブル	ゲニユ アレクサ	ゲニユ インモビル ⁰
8360	8353	8368	50K13N	8060
	2軸アルミ支柱	角度調整付 2軸アルミ支柱		

お問い合わせ先

- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- ・本カタログの内容は 2018 年 08 月現在のものです。