


完成用部品

1C50 タレオ

New Step! New Standard!

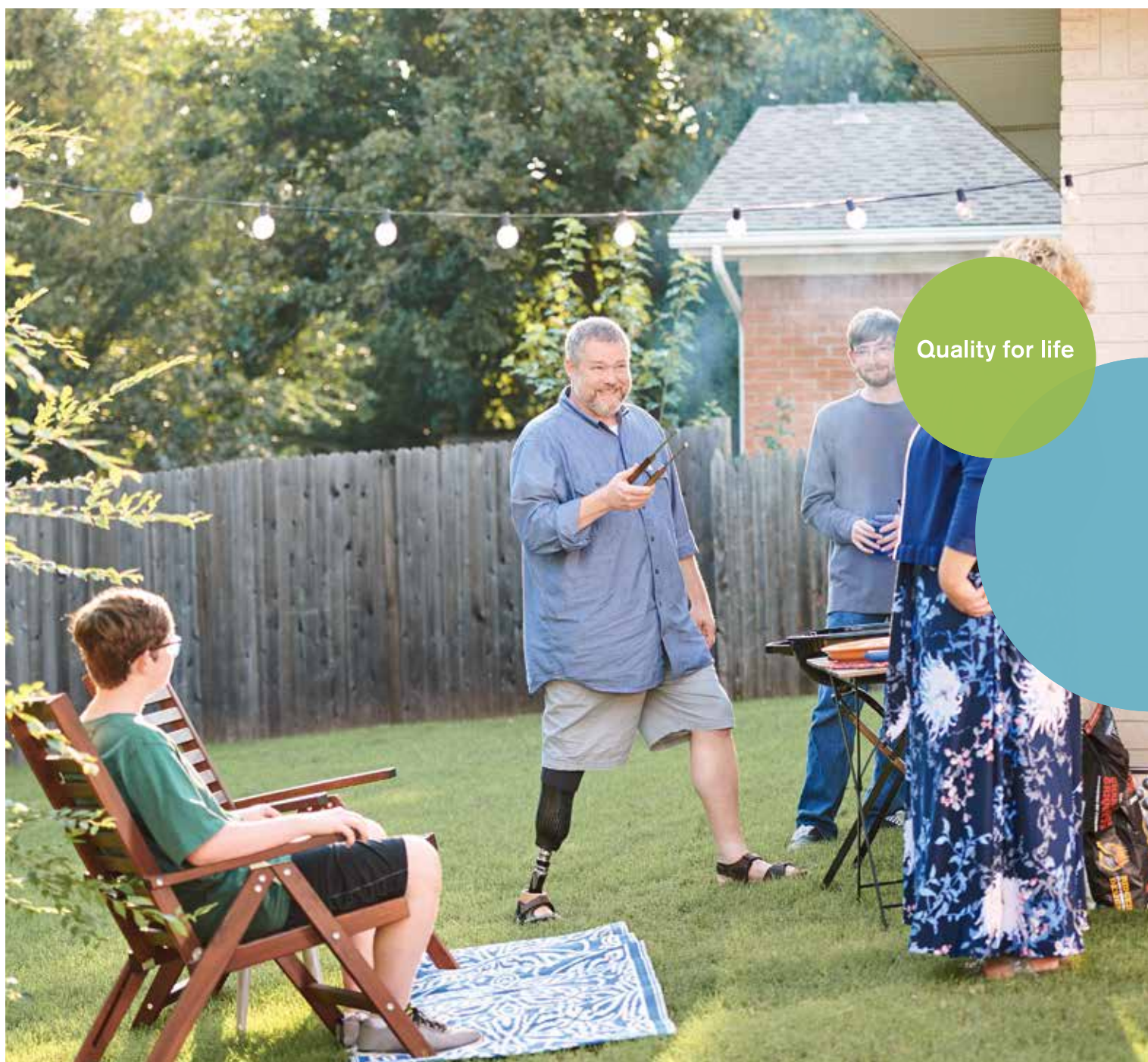

Quality for life

Taleo タレオ 中～高活動ユーザー向けカーボンフット カーボンとは思えない大きな可動域と滑らかな動きで、路面変化もなんのその！ オットーボックの新たなスタンダード足部

1C50 タレオは、オットーボック足部のスタンダードに相応しく、幅広い活動度のユーザーに適応します。1C30では物足りない、1C60ではハード過ぎる、そんな要望に応え、中活動ユーザーが求める滑らかなカーボンのしなりと、高活動ユーザーが求めるダイナミックな反発力を両立しました。

- ゆっくり歩きから早歩きまで違和感がない
- 屋外の不整路面に対応
- スポーツ経験者も納得の反発
- サンドルや鼻緒付きの靴を装着できる
- 海水や塩素水まで対応する防水（本体のみ）

1C50の構造



ユーザーとPOからの圧倒的支持

テストユーザー（60名以上）の82% が3週間の使用後、**今まで使ってきたどの足部よりもタレオが優れる** と回答

テストユーザーの担当PO（25名）の全員が、**タレオはMG3ユーザー向け足部として最も優れている** と回答

User	動きが自然で、体が軽い	キャパの大きい足部	PO
User	足の裏がべったり地面に吸いつく感じ	歩行スピードへの追従性の幅が広い	PO
User	腰や背中へのストレスから解放された気分	背屈角度が大きく、つま先まで完全に荷重できて踏み返し滑らか	PO
User	C-Legのパフォーマンスまで良くなった	歩行時だけでなく、静止立位での安定性が高い	PO
User	不整路面は特にすごい！		
User	アキレス腱を伸ばすような動きができる		



マーティン 47歳 下腿切断
アメリカ オクラホマ在住

タレオは一言で言うなら「すごく快適」な足部です。踵からつま先まで途切れることなく滑らかで、自然なんです。かと言って柔らかすぎることはなく、力強く歩くことができます。一歩一歩が安心です。しかも疲れにくく、凸凹な路面でも歩きやすい。タレオとなら、どこでも行きたくなくなります。

2C15 フットシェル



コネクションプレート・指股・排水穴付き

- ・美しい外観
マット仕上げにより、テカリ過ぎず、自然な質感。靴を脱いでサンダルを履いても違和感が少ない。
 - ・指股
本体の指股を収納し、指の先端まで滑らかな体重移動をサポート。
- * 排水穴はあくまで補助的な役割です。水中で使用した場合は、内部の水を意図的に排水し、タオルで拭いて乾かしてください。

テクニカル インフォメーション

発注品番 (注文時の表記例)

製品番号 = 左右 サイズ - カテゴリー - P / 色 形状

1C50 = R 24 - 5 - P / 4 N

同梱内容

- ・スペクトラソック
- ・ヒールウェッジ3種
- ・フットシェル

* 必ずウェッジを取り付けてご使用ください。



製品番号	1C50									
モビリティグレード	3 - 4									
サイズ	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長 (幅狭フットシェルの場合)	136 mm	137 mm	140 mm	141 mm	-	-	-	-	-	-
実長 (標準フットシェルの場合)	-	-	145 mm	150 mm	159 mm	172 mm				
重さ (幅狭フットシェルの場合)	486 g	500 g	565 g	590 g	-	-	-	-	-	-
重さ (標準フットシェルの場合)	-	-	585 g	610 g	690 g	720 g	745 g	800 g	865 g	
最大体重制限	~88 kg		~100 kg		~115 kg	~130 kg	~150 kg			
完成用部品価格*	¥217,800									

* 2020年6月現在

カテゴリーとフットシェル形状の選択肢

サイズ \ カテゴリー	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 cm	■	■	■	■	■	-	-	-	-
23 cm	■	■	■	■	■	■	-	-	-
24 cm	■	■	■	■	■	■	■	-	-
25 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	-
26 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	■
27 cm	-	-	■	■	■	■	■	■	■
28 cm	-	-	■	■	■	■	■	■	■
29 cm	-	-	-	■	■	■	■	■	■
30 cm	-	-	-	■	■	■	■	■	■

■ 幅狭(S)フットシェルのみ ■ 両方選択可能 ■ 標準(N)フットシェルのみ

体重と活動レベルによるカテゴリー選択の目安

体重	中活動	高活動
~51 kg	1	2
52~58 kg	2	3
59~67 kg	3	4
68~77 kg	4	5
78~88 kg	5	6
89~100 kg	6	7
101~115 kg	7	8
116~130 kg	8	9
131~150 kg	9	-

ヒント：カテゴリー選択に迷った際には、大きい方のカテゴリーを選択。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112

交換部品

- ・2C19 コネクションプレート標準用
- ・2C20 コネクションプレート幅狭用
* 2C19、2C20の発注品番は義足総合カタログをご覧ください。
- ・2F50 ヒールウェッジ(3種セット)

発注品番	対応サイズ
2F50=22-25	22-25 cm
2F50=26-28	26-28 cm
2F50=29-30	29-30 cm

お問合せ先