


ottobock.

完成用部品

1C53 タレオLP

低床足部の常識が変わる

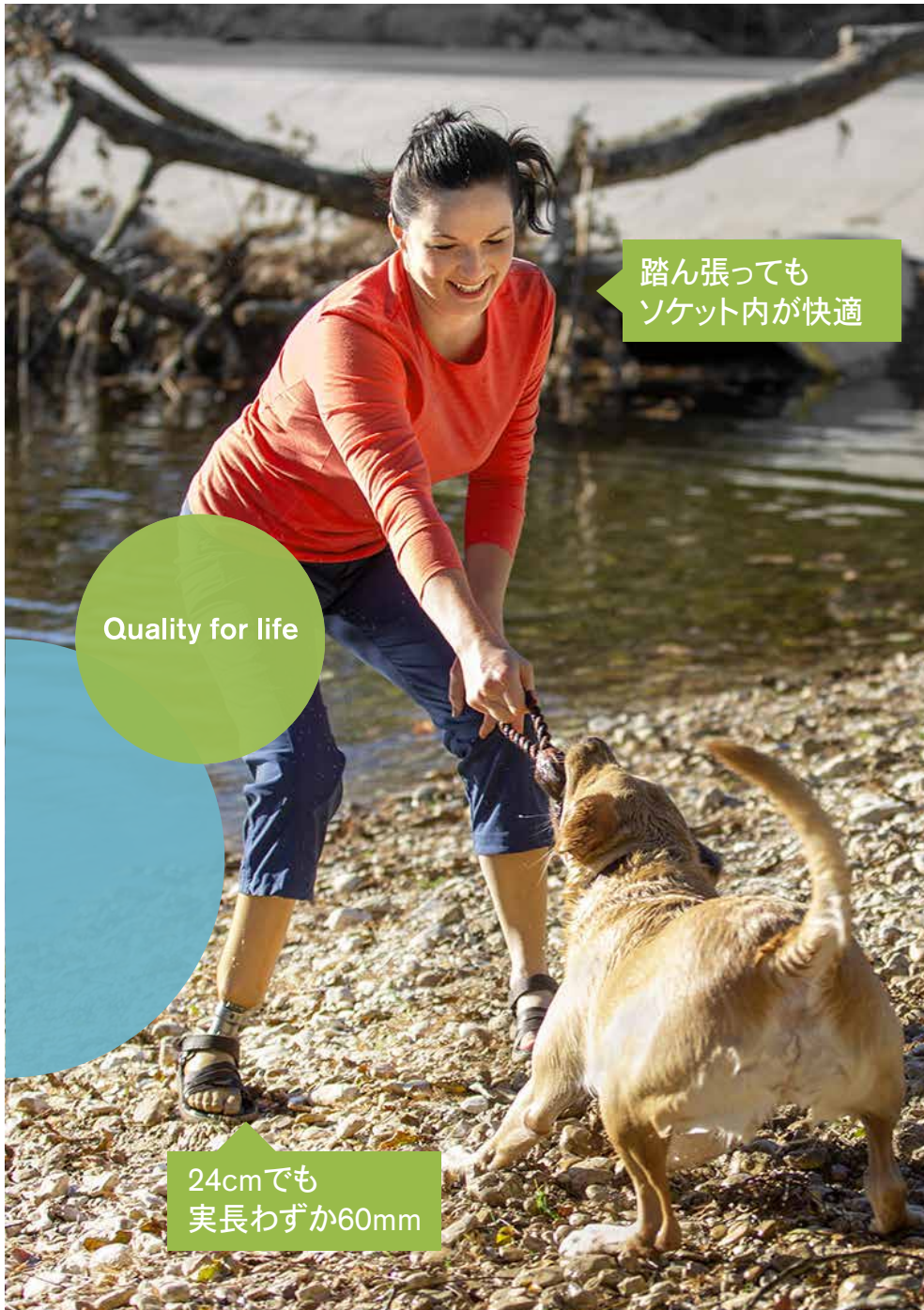

踏ん張っても
ソケット内が快適

Quality for life

24cmでも
実長わずか60mm



縦にも横にも滑らか



大きな可動域



防水

オットーボックの新スタンダード タレオに低床タイプが仲間入り 低床カーボン足部の常識が変わる

大好評の1C50タレオの機能を、25cmでわずか60mm（フットシェル装着時）のコンパクトボディに詰め込みました。踵からつま先までの滑らかなロールオーバーと、様々な路面にフィットする可動域の広さは、試着で屋外を歩くと驚きと共に実感できます。


- 様々な歩行スピードへの追随性
- 滑らかなロールオーバーによる快適な歩行
- 大きな可動域により、多様な路面環境に適應
- ソケット内の圧迫など、不快感の軽減
- 海水・塩素水まで対応する防水（本体のみ）

YouTube



タレオLPの実際の動きを動画でご覧ください。

1C53の構造

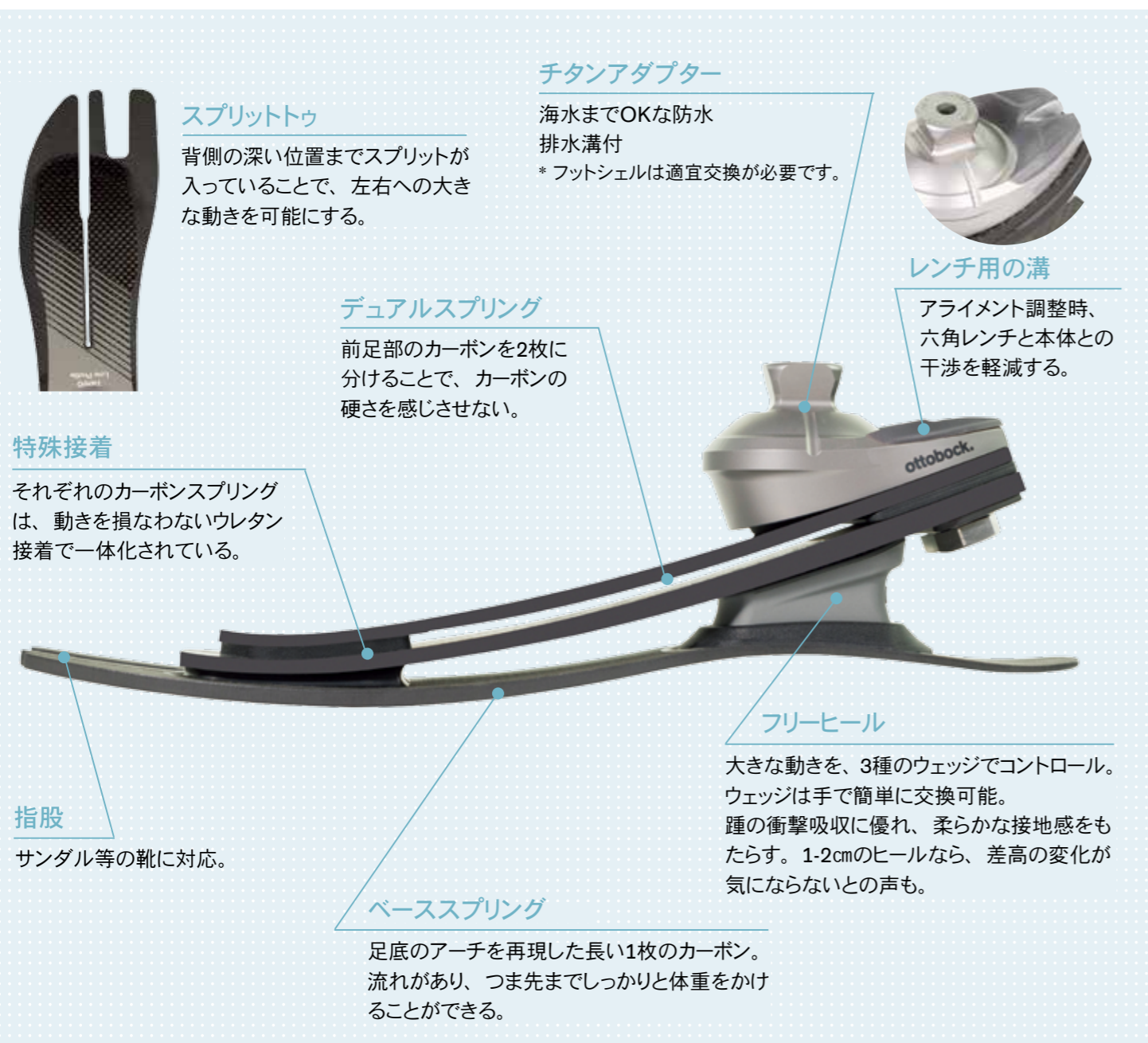

低クリアランスとは思えない滑らかさ、可動域は、まさに驚きです

現場の声

オットーボックの営業チームが自信を持ってお勧めする1C50タレオと1C53タレオLP。試着同行などで、全国のお客様からの反響を実感している営業からの熱いコメントをご覧ください。



馬場英次

担当：北海道/代理店

タレオLP!こんなに低くなったのにタレオに引けを取らない抜群の可動域。これには正直驚きました。1C50/1C53ならではの動きを是非お試しください!



藤田真弓

担当：東北/富山/茨城

低クリアランスにも関わらず、1C50と遜色ない大きな可動域と滑らかな動きを実現している1C53を、是非お試しください!



飯島雅樹

担当：関東/沖縄


歩行時の滑らかさがクセになります。1C53の予想を裏切る可動域の広さを是非体感ください。新たなカーボン足部時代の幕開けです。



若林一雄

担当：中部/関西一部

タレオを履いたら痩せました。歩行速度や路面環境への対応が抜群で、ストレスを感じることなく長い距離を自由自在に歩けます。

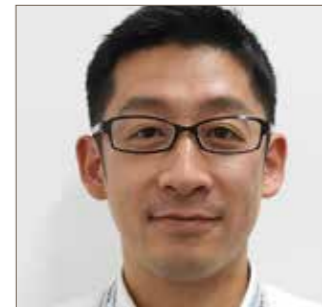

池田星次

担当：東京一部

コンピューター制御膝継手の試着時もコレを持っていきます! いろいろとバランスがいい感じですよ。



吉田剛

担当：中四国/関西/北陸一部

1C50/1C53を是非多くのユーザー様に体感していただき、滑らかな動きと快適性に驚いてほしいです。



和田真生

担当：九州/神奈川/新潟

自信作のタレオシリーズです。新作の1C53は低床型足部とは思えない滑らかさと可動域で、様々なユーザー様にオススメです。

2C15 フットシェル



コネクションプレート・指股・排水穴付き

- ・美しい外観
マット仕上げにより、テカリ過ぎず、自然な質感。靴を脱いでサンダルを履いても違和感が少ない。
- ・指股
本体の指股を収納し、指の先端まで滑らかな体重移動をサポート。

* 排水穴はあくまで補助的な役割です。水中で使用した場合は、内部の水を意図的に排水し、タオルで拭いて乾かしてください。

テクニカル インフォメーション

発注品番 (注文時の表記例)

製品番号 = 左右 サイズ - カテゴリー - P / 色 形状
 1C53 = R 24 - 5 - P / 4 N



- 同梱内容
- ・スペクトラソック
 - ・ヒールウェッジ3種
 - ・フットシェル

* 必ずウェッジを取り付けてご使用ください。

製品番号	1C53									
モビリティグレード	3 - 4									
サイズ	22cm	23 cm	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
実長 (幅狭フットシェルの場合)	52mm	52 mm	55 mm	56 mm	-	-	-	-	-	
実長 (標準フットシェルの場合)	-	-	60 mm		65 mm			70 mm		
重さ (幅狭フットシェルの場合)	421g	458 g	474 g	519 g	-	-	-	-	-	
重さ (標準フットシェルの場合)	-	-	493 g	536 g	584 g	589 g	632 g	680 g	720 g	
最大体重制限	88 kg		100 kg		115 kg	130 kg	150 kg			

カテゴリーとフットシェル形状の選択肢

サイズ \ カテゴリー	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22 cm	■	■	■	■	■	-	-	-	-
23 cm	■	■	■	■	■	■	-	-	-
24 cm	■	■	■	■	■	■	■	-	-
25 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	-
26 cm	■	■	■	■	■	■	■	■	-
27 cm	-	-	■	■	■	■	■	■	■
28 cm	-	-	■	■	■	■	■	■	■
29 cm	-	-	-	■	■	■	■	■	■
30 cm	-	-	-	■	■	■	■	■	■

■ 幅狭(S)フットシェルのみ ■ 両方選択可能 ■ 標準(N)フットシェルのみ

体重と活動レベルによるカテゴリー選択の目安

体重	中活動	高活動
~51 kg	1	2
52~58 kg	2	3
59~67 kg	3	4
68~77 kg	4	5
78~88 kg	5	6
89~100 kg	6	7
101~115 kg	7	8
116~130 kg	8	9
131~150 kg	9	-

ヒント：カテゴリー選択に迷った際には、大きい方のカテゴリーを選択。

交換部品

2C15フットシェル

コネクションプレート付。標準と幅狭の2種類から選択してください。

発注品番 (注文時の表記例)

製品番号 = 左右 サイズ 色 形状
 2C15 = L 25 4 N

製品番号	2C15									
左右	左(L), 右(R)									
サイズ(幅狭)	22 cm	23 cm	24 cm	25 cm	-	-	-	-	-	
サイズ(標準)	-	-	24 cm	25 cm	26 cm	27 cm	28 cm	29 cm	30 cm	
形状	標準(N), 幅狭(S)									

ヒールウェッジ (3種セット)

発注品番	対応サイズ
2F50=22-25	22-25 cm
2F50=26-28	26-28 cm
2F50=29-30	29-30 cm

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F
 www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112

お問合せ先